





SZAGCSÖKKENTŐ ORRGYŰRŰ


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

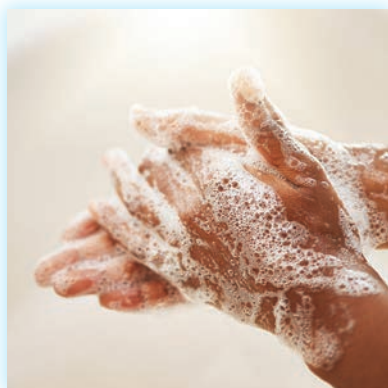

- 1** Használat előtt mosson kezet.

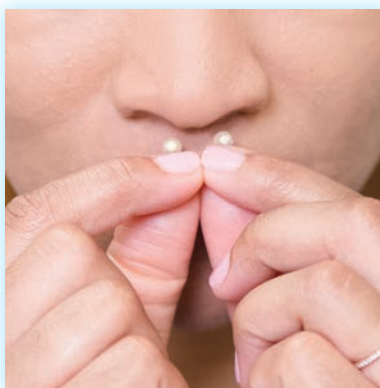

- 2** Óvatosan helyezze a Halót mindkét orrníylásba, úgy, hogy az orrsövény aljához simuljon.

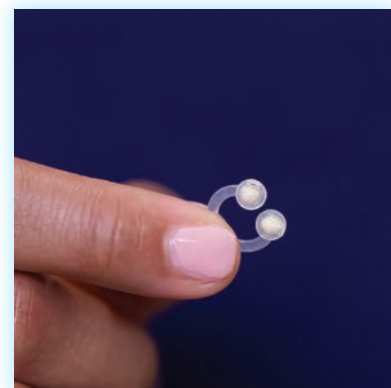

- 3** Használat után vegye ki, és dobja ki.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Irritáció vagy allergiás reakció esetén hagyja abba a használatot.

Fulladásveszély. Gyermekektől elzárva tartandó.

Természetes gumilatex nélkül készült.

BPA-mentes.

Nem steril.

Fémet vagy fóliát nem tartalmaz.

Kizárólag egyszer használható.

A használatot bemutató videóhoz olvassa be a QR-kódot.

